



Dermovitamina

MICOBLOCK®

VERRUCHE CRYO



CONTENUTO

- 1 Erogatore da 38 ml con tappo applicatore fissato in modo permanente; contiene dimetiletere (DME)
- 1 Istruzioni per l'uso
- 8 Cerotti protettivi
- 16 Tamponi detergenti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE CRYO è un prodotto criochirurgico per il trattamento di verruche comuni e plantari presenti su mani e piedi, nonché del mollusco contagioso (*Molluscum Contagiosum*). Tali formazioni cutanee possono essere rimosse tramite congelazione (crioterapia).

IDENTIFICAZIONE DELLE VERRUCHE COMUNI E PLANTARI

Le verruche sono escrescenze cutanee che si manifestano sullo strato superiore della pelle e sono causate da un virus chiamato papilloma virus umano (HPV). Le verruche comuni compaiono solitamente sul dorso delle mani e in prossimità delle unghie; possono manifestarsi anche sui gomiti e sulle ginocchia.

Le **verruche comuni** sono solitamente ruvide, dure e presentano un aspetto a forma di cupola simile a un cavolfiore, di solito non sono dolorose.

Le **verruche plantari** si manifestano sul dorso o sulle piante dei piedi. Talvolta presentano punti scuri visibili sotto la superficie della verruca. La pressione causata dallo stare in piedi e dal camminare appiattisce una verruca plantare e la costringe a formare, sotto la superficie della pelle, uno strato di cute dura "callosa" sulla verruca stessa. Le verruche plantari possono essere dolorose, soprattutto se localizzate sul tallone o sulla parte anteriore della pianta del piede, presentano un aspetto a forma di cupola che può risultare appiattito dallo stare in piedi/dal camminare.

In caso di dubbio in merito al fatto che la condizione sia una verruca, consultare un medico.

IDENTIFICAZIONE DEL MOLLUSCO CONTAGIOSO

Il mollusco contagioso si manifesta tramite papule perlate, rosa e rotonde che sembrano un cappello. È una condizione molto contagiosa, causata da un virus del vaiolo. Le papule di mollusco contagioso si presentano in gruppi, di solito sul tronco, sulle braccia e sulle gambe. La dimensione delle papule varia da 1 mm a 8 mm.

INDICAZIONI / USO PREVISTO

Il prodotto è indicato per la rimozione di verruche cutanee presenti su mani e piedi e papule di mollusco contagioso (*Molluscum Contagiosum*). Il prodotto è destinato all'uso come prodotto da automedicazione in soggetti di età superiore ai 4 anni di età.

CONTROINDICAZIONI

- L'uso di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE CRYO è controindicato nei seguenti casi:
- in presenza di o quando è stata confermata una diagnosi di cancro e/o di trattamento per il cancro
 - per l'uso nel trattamento di verruche genitali
 - in caso di pelle scura o altamente pigmentata
 - in caso di presenza di voglie, nei (pelosi), macchie di bellezza o altri strane escrescenze
 - in caso di pelle irritata o infiammata o in presenza di eczemi
 - per l'uso sul viso
 - per le zone sensibili della pelle, ossia collo, ascelle, seno e glutei
 - per condizioni cutanee sconosciute o quando sussiste il dubbio che la condizione cutanea sia o meno una verruca
 - in caso di ipersensibilità o allergia al freddo estremo (orticaria da freddo)
 - in soggetti diabetici e con problemi circolatori (malattia di Raynaud)
 - in soggetti che stanno assumendo farmaci immunosoppressori o in presenza di una diagnosi confermata di malattie autoimmuni o di collagenopatie
 - per l'uso in presenza di infezione da HIV
 - per soggetti in terapia con anticoagulanti ed emofiliaci
 - per l'uso in bambini al di sotto dei 4 anni di età
 - in combinazione con altri trattamenti per le verruche

AVVERTENZE/PRECAUZIONI


- Erogatore estremamente infiammabile. Erogatore pressurizzato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione
- Vietato fumare
- Solo per uso esterno
- Non perforare o bruciare, nemmeno dopo l'uso
- Non spruzzare su una fiamma libera o su un'altra fonte incendiaria
- Non esporre l'erogatore a temperature superiori a 50 °C
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non inalare lo spray

- Evitare il contatto con gli occhi. Non spruzzare negli occhi poiché può causare congelamento e cecità
- Non ripetere il trattamento più di 4 volte a intervalli di 14 giorni tra i trattamenti. Consultare un medico se la verruca non viene rimossa
- Il prodotto può causare congelamento, depigmentazione o la formazione di cicatrici se non viene utilizzato in conformità con le presenti istruzioni per l'uso
- Richiedere un parere medico, in gravidanza o durante l'allattamento


INDICAZIONI PER L'USO IN CASO DI VERRUCHE COMUNI E PLANTARI

Precauzione: Non rimuovere dall'erogatore il cappuccio applicatore fissato in modo permanente.

Dimensioni della verruca	Numero di volte per le quali viene premuto il fondo dell'erogatore
Verruche di piccole dimensioni < 3 mm	Premere il dispenser per 3 volte consecutive
Verruche di dimensioni medie da 3 mm a 5 mm	Premere il dispenser per 4 volte consecutive
Verruche di grandi dimensioni > 6 mm	Premere il dispenser per 5 volte consecutive

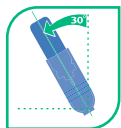

Rivolgere la verruca verso l'alto. Posizionare l'apertura rotonda del cappuccio applicatore direttamente sopra alla verruca così da circondarla. Assicurarsi che i bordi dell'applicatore siano vicini e ben aderenti alla pelle circostante. Tenere l'erogatore di aerosol in posizione verticale con un angolo massimo di 30° affinché il trattamento sia efficace.

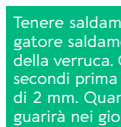

Tenere saldamente il prodotto sopra la verruca. Premere il fondo dell'erogatore saldamente con il pollice da 3 a 5 volte a seconda della dimensione della verruca. Consultare la tabella. Tenere l'applicatore in posizione per 10 secondi prima di rimuoverlo dalla pelle. Potrebbe apparire un alone bianco di 2 mm. Quando il punto si asciugherà apparirà una piccola cicatrice che guarirà nei giorni e nelle settimane successivi.

Precauzione: in presenza di un gruppo di verruche posizionate vicine tra loro, trattare ogni verruca separatamente ad intervalli di 14 giorni tra i trattamenti.

Precauzione: nella maggior parte dei casi sarà sufficiente un singolo trattamento per rimuovere la verruca. In caso di verruche persistenti ripetere il trattamento dopo 10 secondi. Se la verruca non viene rimossa entro 14 giorni, ripetere il trattamento come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.

- 3 Rimuovere il cappuccio applicatore dalla verruca. Immediatamente dopo il trattamento è possibile percepire una leggera sensibilità cutanea o un leggero formicolio temporanei.
- 4 Pulire l'apertura del cappuccio applicatore con un tampone detergente dopo ogni utilizzo per ridurre il rischio di trasmissione o infezione.
- 5 Se la verruca risulta sollevata e/o molto sensibile dopo il trattamento, proteggerla applicando uno o più cerotti protettivi.

DISPOSITIVO MEDICO
CE 0344

CONFEZIONE
38 ml

Foglietto: PAP 22 Carta - Raccolta carta
Per lo smaltimento verifica le disposizioni
del tuo Comune

R04-1125 Rev. novembre 2025
REF 140036
article 740191

Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega
Paesi Bassi

Distribuito da:
Pasquali S.r.l.
Via Dante, 7 - 20123 Milano
Italy - dermovitamina.it

LEGENDA

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Utilizzare il prodotto soltanto come indicato. Non usare il prodotto come indicato potrebbe causare congelamento.

Non esporre al sole


ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

Non utilizzare se l'erogatore
o la confezione sono danneggiati.


25°C
Limite massimo di temperatura

ISTRUZIONI PER L'USO IN CASO DI MOLLUSCO CONTAGIOSO

Precauzione: Non rimuovere dall'erogatore il cappuccio applicatore fissato in modo permanente.
Avvertenza: applicare su una papula di mollusco contagioso e attendere 24 ore prima di procedere per verificare l'eventuale ipersensibilità. Non trattare più di 2 papule di mollusco contagioso al giorno. Non trattare il bambino in caso di presenza di eczema.

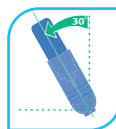

Rivolgere la papula verso l'alto. Posizionare l'apertura rotonda del cappuccio applicatore direttamente sopra alla papula così da circondarla. Assicurarsi che i bordi dell'applicatore siano vicini e ben aderenti alla pelle circostante. Tenere l'erogatore di aerosol in posizione verticale con un angolo massimo di 30° affinché il trattamento sia efficace.

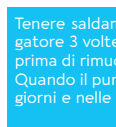

Tenere saldamente il prodotto sopra la papula. Premere il fondo dell'erogatore 3 volte con il pollice. Tenere l'applicatore in posizione per 5 secondi prima di rimuoverlo dalla pelle. Potrebbe apparire un alone bianco di 2 mm. Quando il punto si asciugherà apparirà una piccola cicatrice che guarirà nei giorni e nelle settimane successivi.

Precauzione: in presenza di un gruppo di papule di mollusco contagioso vicine tra di loro, trattare ogni papula separatamente rispettando un intervallo di 1 giorno tra le applicazioni per consentire al cappuccio applicatore di raggiungere la temperatura ambiente. Non trattare più di 2 papule di mollusco contagioso al giorno.

Precauzione: in caso di più papule di mollusco contagioso ravvicinate, trattare ogni papula separatamente rispettando un intervallo di 1 giorno tra i trattamenti. Se la papula non viene rimossa entro 14 giorni, ripetere il trattamento come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.

- 3 Rimuovere il cappuccio applicatore dalla papula. Immediatamente dopo il trattamento è possibile percepire una leggera sensibilità cutanea o un leggero formicolio temporanei.
- 4 Pulire l'apertura del cappuccio applicatore con un tampone detergente dopo ogni utilizzo per ridurre il rischio di trasmissione o infezione.
- 5 Se la papula risulta sensibile dopo il trattamento, proteggerla applicando uno o più cerotti protettivi.

DOPO IL TRATTAMENTO

- Il trattamento può causare vesciche. Quando ciò si verifica non forare la vescica
- Non pizzicare o graffiare il sito o la verruca trattati
- Mantenere l'area trattata asciutta e pulita per evitare infezioni
- È possibile nuotare, lavarsi, fare il bagno e fare la doccia normalmente.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non superare i 25 °C
- Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali

EFFETTI COLLATERALI POTENZIALI

- Il processo di crioterapia può causare ipopigmentazione (macchie chiare) o iperpigmentazione (macchie scure). Tali fenomeni spariranno
- Sanguinamento
- Formazione di vesciche
- Formazione di cicatrici in caso di applicazione della crioterapia più a lungo di quanto indicato
- Disagio temporaneo come dolore o formicolio
- Consultare un medico in caso di infezione e/o complicanze

RECLAMI E ASSISTENZA DA PARTE DEL SERVIZIO CLIENTI

Contattare il distributore o il sito web www.dermovitamina.it per qualsiasi domanda o per segnalare problemi. Contattare il produttore, distributore o visitare il sito Web "http://www.war-freezer.com" per qualsiasi domanda o per segnalare problemi. Gli incidenti gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti del proprio paese di residenza.

Misurare la
verruca